


**evernoa** ist ein **tragbares, schnelles** und **hochpräzises FeNO-Gerät**, das die **Diagnose** und **Überwachung** von **Asthma** erleichtert, indem es nützliche Informationen zu **Atemwegsentzündungen** liefert.

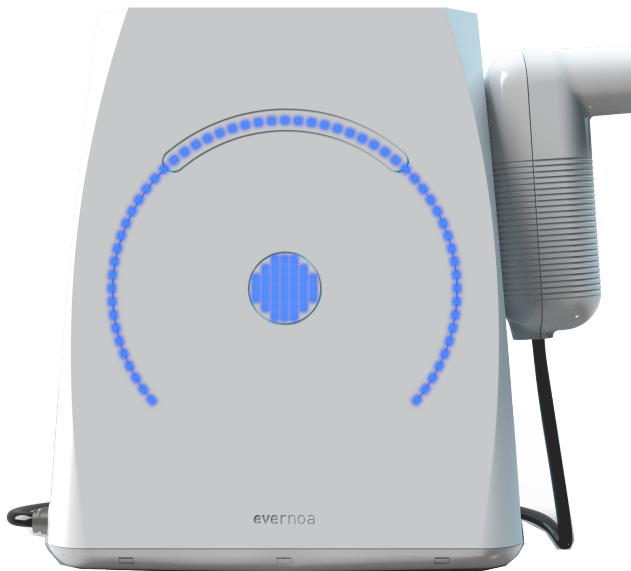

## VORTEILE IN ZEITEN VON **COVID-19**

- Reduziert das Ansteckungsrisiko
- Mehr Hygiene

Dank des Einatmens der Umgebungsluft

- Möglichkeit der Patientenführung mit geringerem Ansteckungsrisiko für den Bediener

Fernbedienung

- Gewährleistet einen größeren Abstand zwischen Patient und Gerät

Stecker > 2m



Einfache Inbetriebnahme und Bedienung



Präzise Ergebnisse in 5 Sekunden



Duale Benutzeroberfläche



Erfüllt ATS/ ERS- und SEPAR Standards



Software-Konnektivität



<b>Messbereich</b>	5-300 ppb	<b>Präzision</b>	< 2 ppb für Werte < 50 ppb ≤ 3% für Werte ≥ 50 ppb
<b>Reaktionszeit</b>	5 s	<b>Richtigkeit</b>	± 4 ppb für Werte < 50 ppb ≤ 8% für Werte ≥ 50 ppb
<b>Aufwärmzeit</b>	Max. 1 min	<b>Inhalation durch das Gerät</b>	Nicht erforderlich
<b>Übertragbarkeit</b>	Ja	<b>Training</b>	Verfügbar
<b>Bereitschaftsbetrieb</b>	> 4 Std. Betrieb > 72 Std. im Standby-Modus	<b>Datenspeicherung</b>	15.000 Messwerte
<b>Lebensdauer</b>	15.000 Messwerte oder 6 Jahre	<b>Ambient NO</b>	Verfügbar
<b>Größe</b>	240x200x165 mm	<b>Gewicht</b>	1,4 kg

#### WICHTIGE INFORMATIONEN ZU EVERNOA

Evernoa misst das fraktionierte exhalierete Stickstoffmonoxid (FeNO) aus dem menschlichen Atem nach den Empfehlungen der American Thoracic Society (ATS) und der European Respiratory Society (ERS). FeNO ist ein quantitatives Maß für Stickstoffmonoxid aus den Atemwegen, das sowohl in der Asthmadignose als auch in der Nachsorge eingesetzt werden kann. Evernoa muss von medizinischem Fachpersonal bedient werden, das eine Schulung erhalten hat und die Bedienungsanleitung gelesen hat. Evernoa kann FeNO bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren bestimmen. Der Bediener muss zwischen dem Messmodus für Kinder (6 s) und dem Erwachsenenmodus (10 s) unterscheiden. Die von evernoa bereitgestellten Ergebnisse sollten von einem Arzt ausgewertet werden.



#### EVERSENS SL

C/ Tajonar 22  
Centro Jerónimo de Ayanz, L4  
31006, Pamplona-Iruña,  
Navarra (Spanien)

info@evernoa.com  
(+34) 948 16 62 50



everSens   
what your breath reveals