


Produkte für die

# Atemwege




*Innovative Technologie für die Respirationsmedizin*

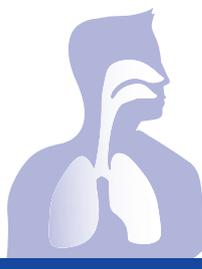

**NebulFlaem<sup>4.0</sup>** PHZNR: 5696779

**Innovatives Inhalationssystem der neuesten Generation**

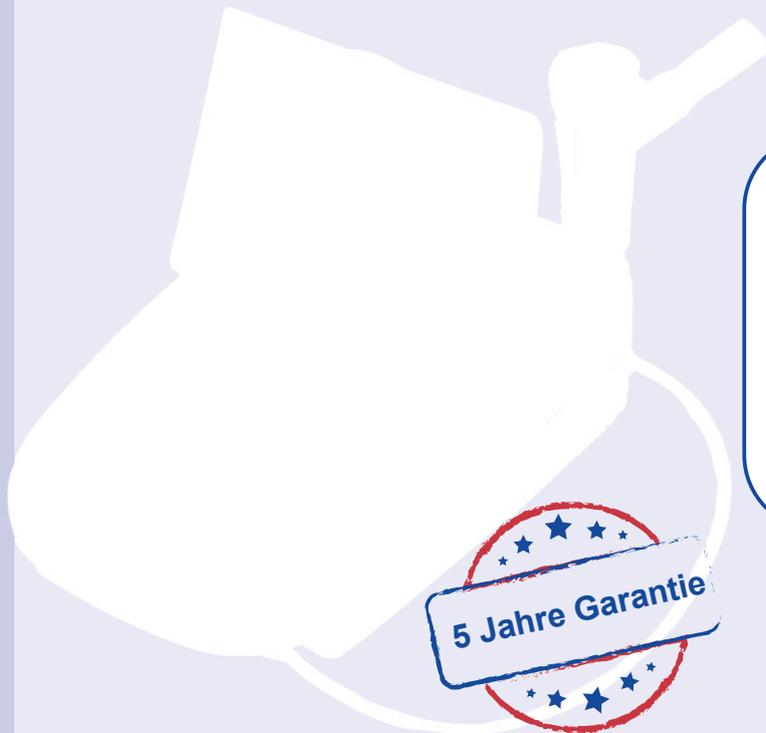

- ▶ Sehr leistungsstarker Kompressor (~3,5 bar max.)
- ▶ Mit Fächern für Zubehör und Netzkabel
- ▶ Einfach zu lagern und zu transportieren
- ▶ Reichhaltiges Zubehör inklusive

inkl.

**RapidFlaem<sup>®</sup> 9 (RF9) Vernebler** PHZNR: 5893103

**Multifunktionaler Vernebler zur Behandlung der oberen, zentralen und peripheren Atemwege**


**2-7 µm  
MMAD**

- ▶ > 5 µm: Ohne Selektor – große Partikel und hohe Geschwindigkeit für Deposition in den oberen Atemwegen
- ▶ ~ 5 µm: Selektor in Position 1 für die Behandlung der zentralen Atemwege und Tracheobronchialregion
- ▶ 3 – 4 µm: Selektor in Position 2 für ein Aerosol zur Behandlung der Lungenregion
- ▶ < 3 µm: Selektor in Position 3 zur Deposition in den Alveolen und in der Lungenperipherie



**NebuAIR+ PHZNR: 4486168**  
**Inhalationsgerät für die Dauerbehandlung**

- ▶ Leistungsstark (3,5 bar max. Druck)
- ▶ Aufbewahrungsfächer und Tragegriff integriert
- ▶ Für alle Altersstufen geeignet
- ▶ Inkl. reichhaltigem Zubehör

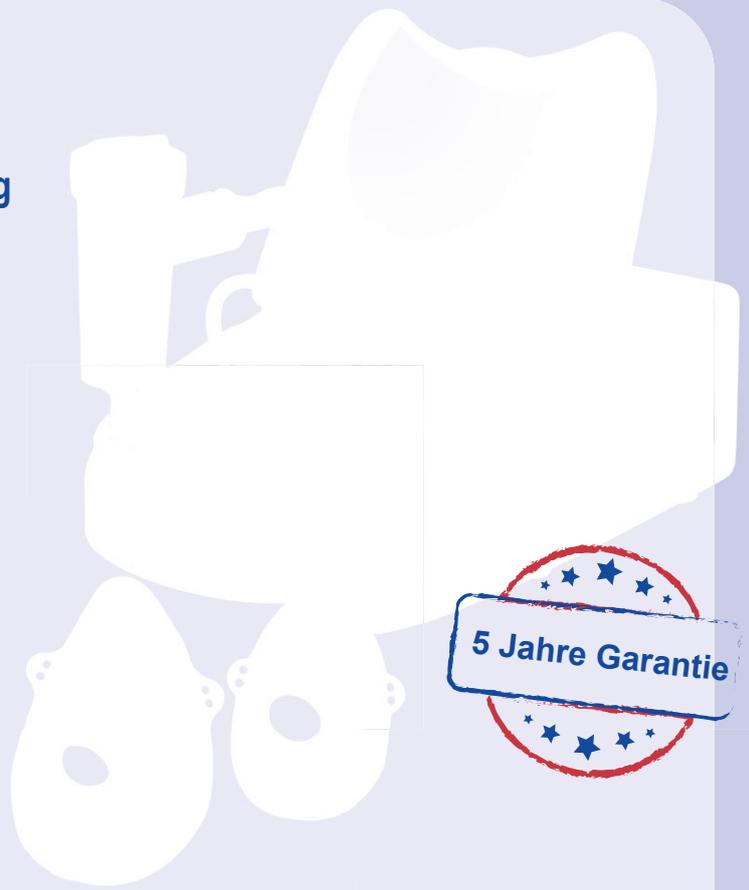

inkl.

**RapidFlaem® 7 Dual Speed Plus (RF7+) Vernebler PHZNR: 4394467**  
**Hocheffizienter Vernebler für kürzere Inhalationszeiten**

- ▶ Besonders lungengängiges Aerosol\*
- ▶ 300x autoklavierbar (134°C bei 2 bar)
- ▶ Effiziente und schnelle Vernebelung
- ▶ 2 Verneblungs-Geschwindigkeiten wählbar
- ▶ Verwendbar mit zentraler Druckluft (Kliniken) oder mit leistungsfähigen Inhalationsgeräte-Kompressoren



LEISTUNGSDATEN DES RF7+ VERNEBLERS*		
Abgabe:	ca. 0,65 ml/min	ca. 0,29 ml/min
MMAD:	2,81 $\mu$ m	2,21 $\mu$ m
Alveolengängige Fraktion unter 5 $\mu$ m:	75,7%	78,2%
Aerosol Output (AO):	0,418 mg	0,431 mg
Aerosol Output Rate (AOR):	0,120 mg/min	0,093 mg/min
Restvolumen	1,08 ml	1,14 ml

\*TÜV Rheinland Italia S.r.l. in Zusammenarbeit mit der Universität Parma gemäß der Norm EN ISO 27427


## Baby-Vernebler-Set

### Baby-Winkel mit Masken in 3 Größen

Gr. 0 - PHZNR: 4394438 (Frühgeborene)

Gr. 1 - PHZNR: 4394444 (1-12 Monate)

Gr. 2 - PHZNR: 4394459 (1-3 Jahre)

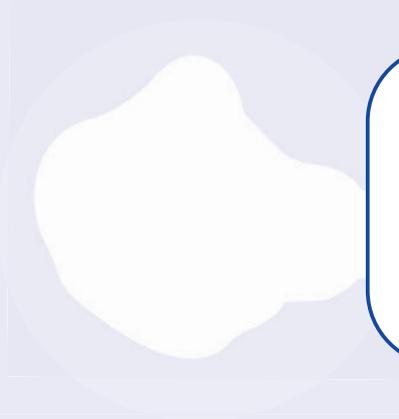

- ▶ Besonders weiches Material zur Anpassung an individuelle Gesichtsformen
- ▶ Einfache Anwendung, auch liegend
- ▶ Kompatibel mit **RF7+** und **RF9**

## RF7+: FLAEM<sup>®</sup> Upgrade Kit PHZNR: 5963967




**Verbrauchsmaterialien**  
für 1 Jahr:  
*Mundstück, Naseneinsatz,  
Schlauch sowie Kinder- und  
Erwachsenenmaske*

## AirPro<sup>®</sup> 3000 PLUS

### Professionelles Inhalationsgerät für den Dauereinsatz in Kliniken

- ▶ Leistungsstarker und langlebiger Kompressor
- ▶ Druckregler mit Manometer zur optimalen Anpassung an verschiedene Vernebler
- ▶ Einfach zu transportieren und zu reinigen
- ▶ Für Kliniken, Krankenhäuser und häusliche Pflege

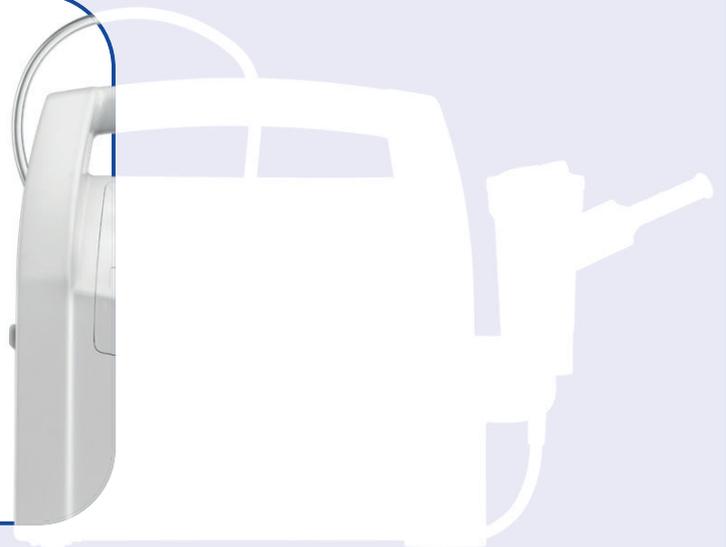

## Rhino Clear® PHZNR: 3137679

Ein Vernebler für Nasenhöhlen und NNH

Für zentrale  
Druckluft  
oder  
Kompressoren

- ▶ Max. Füllmenge 25 ml
- ▶ MMAD > 15µm
- ▶ Für alle Altersklassen geeignet
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Biokompatible Materialien
- ▶ 3 verschiedene Nasenadapter und Farben
- ▶ 300x autoklavierbar (2 bar, 134°C)

## Rhino Clear® *Sprint* PHZNR: 4759271

Nasenhigiene und medikamentöse Behandlung für unterwegs

- ▶ Praktisch und kabellos
- ▶ Batteriebetrieben (2 AA-Batterien)
- ▶ Einfache Anwendung
- ▶ Für obere Atemwege optimiertes Aerosol
- ▶ Max. Füllmenge 15 ml
- ▶ Inkl. 3 verschiedene Nasenadapter
- ▶ Für jedes Alter geeignet


## Rhino Clear® *Mobile* PHZNR: 4141507

Mit integriertem Akku und Ladestation

- ▶ Praktisch und kabellos mit wiederaufladbarem Ni-MH Akku
- ▶ Schnelle Verneblung (10 ml in ca. 2 Minuten)
- ▶ Max. Füllmenge 15 ml
- ▶ Inkl. 3 verschiedene Nasenadapter
- ▶ Für jedes Alter geeignet

**AirFeel®** PHZNR: 5796593

Tragbares innovatives Atemphysiotherapiegerät

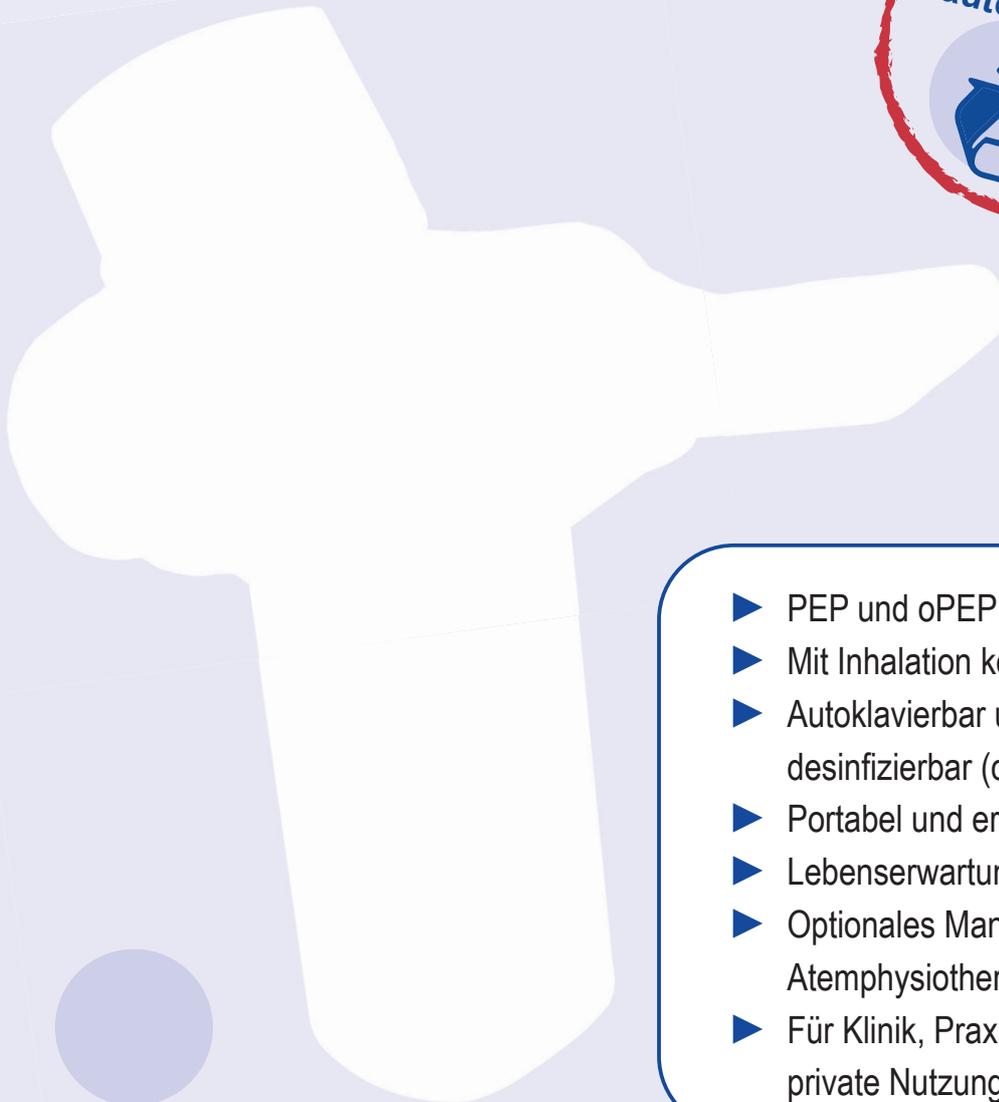

- ▶ PEP und oPEP in einem Gerät
- ▶ Mit Inhalation kombinierbar
- ▶ Autoklavierbar und desinfizierbar (ca. 300 mal)
- ▶ Portabel und ergonomisch
- ▶ Lebenserwartung ca. 5 Jahre
- ▶ Optionales Manometer-Set für Atemphysiotherapeuten
- ▶ Für Klinik, Praxis und private Nutzung



*Mit Inhalation kombinierbar*



*Optionales Manometer-Kit*

# AirFeel® IMT

## Innovatives Atemphysiotherapiegerät für inspiratorisches Muskeltraining (IMT)

- ▶ Portabel und ergonomisch
- ▶ Individuell einstellbarer Widerstand
- ▶ Effektives Training
- ▶ Autoklavierbar und desinfizierbar (ca. 300 mal)
- ▶ Hygienisch und sicher
- ▶ Für Klinik, Praxis und private Nutzung

Abnehmbare  
Kappe

Operative Range  
6-60cm H<sub>2</sub>O


Einfaches  
Ablesen



Einfache  
Druckeinstellung

# FLAEM® Hygienebox PHZNR: 5953265

Antimikrobielle Aufbewahrungs- und  
Transportbox zur Wiederaufbereitung

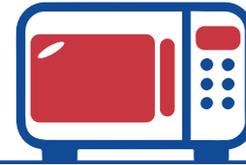


*Dampfsterilisation  
in der Mikrowelle*



*Desinfektion in der Box*



- ▶ Einfache Wiederaufbereitung in der Mikrowelle oder mit Desinfektionsmitteln
- ▶ Antimikrobielle Aufbewahrungs- und Transportbox
- ▶ Für Vernebler, Rhino Clear, AirFeel & IMT, und andere Produkte wie Schnuller, Beißringe, etc.
- ▶ Maße: 19,5 x 14,5 x 9,5 cm

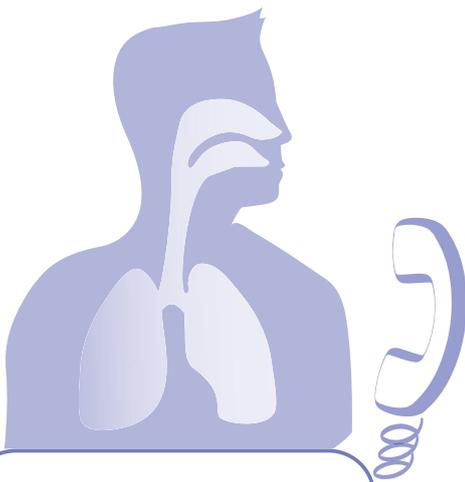

**Ferdinand Menzl**  
Medizintechnik GmbH

Portheimgasse 14  
1220 Wien

Mail: [info@menzl.com](mailto:info@menzl.com)  
Tel.: +43 (0) 1 255 8960 -0  
[www.menzl.com](http://www.menzl.com)

## Wir beraten Sie gerne!

Ihr Fachhändler