

Aspira go

Leistungsstark
und mobil

Hochwertige Absaugpumpe auch für unterwegs

Aspira go ist eine professionelle Absaugpumpe, die Effizienz und Mobilität vereint. Durch einen leistungsstarken Motor und eine robuste Konstruktion eignet sich die **Aspira go** Absaugpumpe sowohl für Krankenanstalten, als auch für die professionelle Heimpflege oder den anspruchsvollen Einsatz in Rettungsfahrzeugen.

Aspira go kann ca. 45 Minuten ohne externe Stromversorgung bei höchster Saugleistung von 30 l/min betrieben werden. Das vollständige Aufladen des Akkus benötigt etwa 4 Stunden und kann sowohl über einen normalen Stromanschluss, als auch über einen 12 V Autostecker erfolgen. Das geringe Gesamtgewicht von nur 2,5 kg, sowie der integrierte Tragegriff machen eine Mitnahme und Nutzung des Gerätes auch abseits von Stromanschlüssen problemlos möglich.

Aspira go verfügt über ein beidseitig montierbares, graduiertes 1-Liter Absaugglas, das, wie auch die Verbindungsschläuche, autoklaviert werden kann. Ein antimikrobieller und hydrophober Hochleistungsfilter garantiert höchste Sicherheit.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Tragbar und mobil einsetzbar (2,5 kg)
- ▶ Lange Akkulaufzeit (45 min)
- ▶ Kurze Ladezeit (ca. 4 Stunden)
- ▶ Saugleistung stufenlos regelbar
- ▶ Maximale Saugleistung 30 l/min *



*Validiert vom TÜV Rheinland
gemäß ISO 10079-1


30 l/min



2,5 kg



45
min

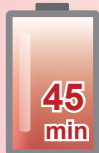

Ihr Fachhändler

Ferdinand Menzl
Medizintechnik GmbH
www.menzl.com