

RapidFlaem® 6 plus

PHZNR.: 4308982

Pfiffig, effizient
&
autoklavierbar!


Autoklavierbarer Vernebler mit Auslaufschutz

Der **RapidFlaem® 6 plus (RF6+)** Vernebler wurde für die Therapie der zentralen und peripheren Atemwege konzipiert und ist für die Verneblung aller für die Feuchtinhalation gängigen Medikamente geeignet.

Der **RF6+** verfügt über einen integrierten Auslaufschutz: Durch diese spezielle und patentierte Konzeption wird ein versehentliches Ausschütten der eingefüllten Medikamentenlösung beim Kippen des Verneblers verhindert.

In Verbindung mit dem **NebulAIR®** oder anderen leistungsfähigen Kompressoren erzeugt der **RF6+** ein sehr feines und für die Behandlung von Lungenerkrankungen optimiertes Teilchenspektrum.

Der **RF6+** ist autoklavierbar (121°C bei 1 bar) und für die Desinfektion mit für Plastik gängigen Lösungen geeignet. Bei Heimgebrauch kann er im Vaporisator oder Geschirrspüler gereinigt oder ausgekocht werden.

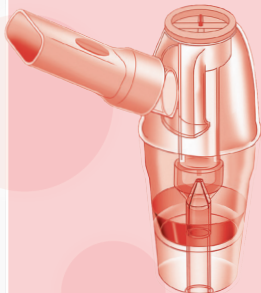

LEISTUNGSDATEN DES RF6+ VERNEBLERS*	
Verneblerkapazität min.:	2 ml
Verneblerkapazität max.:	8 ml
MMAD:	2,8 µm
FPF Partikel unter 5µm:	76%
Output Rate pro Minute:	106 µl
Residualvolumen	1,24 ml

*Aerosolcharakteristika gemessen mit Mundstück und offenem Ventildeckel bei Inamed Reserach GmbH im Auftrag des TÜV Rheinland LGA Products GmbH gemäß EN 13544-1, europäischer Standard für Inhalationsgeräte, in Verbindung mit dem Kompressor des Flaem NebulAIR®

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Integrierter Auslaufschutz
- ▶ Lungengängiges Aerosol (76% < 5 µm)*
- ▶ Autoklavierbar (121°C bei 1 bar)
- ▶ Effiziente Vernebelung durch Ventilsystem
- ▶ Verwendbar mit allen gängigen Inhalationsgeräte-Kompressoren

Ihr Fachhändler

